



ri-former®

Estación de Diagnóstico Modular

El Riester **ri-former**® es una estación de diagnóstico modular que ofrece flexibilidad para hospitales y consultorios médicos. Los módulos de diagnóstico pueden combinarse individualmente para adaptarse a la especialidad del profesional y al lugar de uso.



La estación de diagnóstico **ri-former®** ofrece ventajas destacadas gracias a sus configuraciones versátiles. Con su fuente de alimentación centralizada, el **ri-former®** proporciona la fiabilidad necesaria para satisfacer las exigencias del entorno dinámico y acelerado de hospitales y consultorios médicos.



La estación de diagnóstico Riester **ri-former®** permite a los profesionales sanitarios (HCP) examinar de forma completa los ojos, oídos, nariz, lengua y piel de los pacientes, convirtiéndola en una herramienta adecuada para las especialidades de ORL (Oído, Nariz y Garganta) y dermatología.

ri-former®

DISEÑO DE ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO PARA PARED

- Diseñada para montarse directamente en la pared o, adicionalmente, sobre un panel mural de ABS ignífugo*
- Se suministra con dos asas y el hardware de montaje

* El panel mural **[12717]** está disponible solo en EE. UU.



ri-former®

ESTACIÓN DE DIAGNÓSTICO CON DISEÑO MÓVIL O PARA RIEL

Estaciones de diagnóstico con base móvil robusta o diseño para riel, 2 asas, dispensador de espéculos y tensiómetro **big ben®**. Disponible con fuente de alimentación de 100 – 240 VCA, incluyendo una gama completa de enchufes internacionales.

- El diseño para riel se fija horizontalmente al riel
- El poste de acero inoxidable y la base y ruedas de plástico permiten una movilidad sencilla
- Altura (incluyendo **big ben®**): 118 – 140 cm (46,5 – 55,1 in)
- Movilidad sin esfuerzo gracias a ruedas de baja fricción con propiedades antiestáticas y dos ruedas bloqueables (Ø 75 mm / 3 in)
- Diámetro de la base móvil: 54 cm (21 in)
- Se suministra con dos asas y un dispensador de espéculos **ri-spec**

Todas las cabezas de instrumentos se venden por separado.

ri-former® PARA RIEL



ri-former® MÓVIL con **big ben®**



Estación de diagnóstico con diseño flexible y modular

Un sistema de diagnóstico modular que ofrece diversos módulos, incluyendo medición de presión arterial (NIBP) y termometría, con una fuente de alimentación centralizada para hasta tres mangos de diagnóstico. Los mangos de Riester incorporan la tecnología **rheotronic®**, que permite un ajuste continuo de la intensidad luminosa y encendido/apagado manual.



Módulos de presión arterial

- › Monitor de presión arterial totalmente automatizado, de grado clínico (**RBP-100**)
- › Esfigmomanómetro aneroide manual, de gran escala y grado clínico (**big ben®**)

Módulos de termometría

- › Termómetro timpánico por infrarrojos (**ri-thermo® tymPRO**)
- › Termómetro por infrarrojos sin contacto, de grado clínico (**ri-thermo® sensioPRO**)
- › Termómetro predictivo oral / axilar / rectal (**RPT-100**)



big ben®



ri-thermo® tymPRO



ri-thermo® sensioPRO



RPT-100

Cabezas de instrumentos

Los sistemas de diagnóstico **ri-former®** de **Riester** admiten hasta tres mangos, cada uno compatible con seis cabezas intercambiables: otoscopio, oftalmoscopio, dermatoscopio, soporte para depresores linguales, espéculo nasal o conductor de luz.



Otoscopio



Oftalmoscopio

Los mangos de diagnóstico están disponibles con una selección de cabezas de instrumentos **Riester ri-scope® L** y **EliteVue** con iluminación LED, que ofrecen hasta 100.000 horas de duración.



Dermatoscopio



Soporte para depresores linguales




Espéculo nasal



Conductor de luz

Accesorios

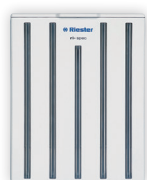

ri-spec
Dispensador de
espéculos



Módulo de extensión

- › Dispensador integrado de espéculos **ri-spec** – para espéculos auriculares y nasales, elija entre cinco embudos para cinco tamaños diferentes de espéculos. Esto permite utilizar un espéculo nuevo en cada exploración y es fácil de rellenar y desinfectar
- › Módulo de extensión – para un mango adicional

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Dimensiones	
Estación de diagnóstico	200 x 180,5 x 75 mm (800 g)
Módulo de extensión	200 x 100 x 75 mm (500 g)
Fuente de alimentación	
	Entrada: 100 – 240 VAC, 50/60 Hz, 0,6 A Salida: 5 VDC, 3 A, 15 W
Estación de diagnóstico	Entrada: 5 VDC, 3 A, 15 W Salida 1: 1 x 3,5 VDC, 700 mA Salida 2: 2 x 5 VDC, 2 x 1,15 A
Módulo de extensión	Entrada: 5 VDC, 3 A, 15 W Salida 1: 1 x 3,5 VDC, 700 mA Salida 2: 1 x 5 VDC, 1 x 1,15 A
Clasificación	
	Pieza aplicada tipo B
Tiempo de encendido	
	ENCENDIDO: 1 Min APAGADO: 5 Mins
Condiciones operativas	
	de 0 °C a +40 °C, entre 10 % y 85 %, humedad relativa
Almacenamiento y transporte condiciones	
	de -5 °C a +50 °C, entre 10 % y 85 %, humedad relativa
Presión del aire	
	de 700 a 1050 hPa

INFORMACIÓN DE PEDIDO

3652-500	Base móvil ri-former® , 2 mangos con ri-spec , 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe UE
3653-500	Base móvil ri-former® , 2 mangos con ri-spec , 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe EE. UU.
3652-600	Base móvil ri-former® , 2 mangos con ri-spec , 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe UE con big ben® cuadrado (incluye brazaletes adulto desinfectable de una sola pieza y cesta)
3653-600	Base móvil ri-former® , 2 mangos con ri-spec , 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe EE. UU. con big ben® cuadrado (incluye brazaletes adulto desinfectable de una sola pieza y cesta)
3652-400	Diseño con riel ri-former® , 2 mangos con ri-spec , 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe UE (sin abrazadera universal)
3653-400	Diseño con riel ri-former® , 2 mangos con ri-spec , 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe EE. UU. (sin abrazadera universal)
10384	Abrazadera universal
3650	Diseño mural ri-former® , 1 mango, 3,5 V / 100 – 240 V con reloj, enchufe UE
3651	Diseño mural ri-former® , 1 mango, 3,5 V / 100 – 240 V con reloj, enchufe EE. UU.
3652	Diseño mural ri-former® , 1 mango, 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe UE
3653	Diseño mural ri-former® , 1 mango, 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe EE. UU.
3650-300	Diseño mural ri-former® , 2 mangos, 3,5 V / 100 – 240 V con reloj, enchufe UE
3651-300	Diseño mural ri-former® , 2 mangos, 3,5 V / 100 – 240 V con reloj, enchufe EE. UU.
3652-300	Diseño mural ri-former® , 2 mangos, 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe UE
3653-300	Diseño mural ri-former® , 2 mangos, 3,5 V / 100 – 240 V sin reloj, enchufe EE. UU.

Cabezas de instrumentos**

10512-301	Cabezal EliteVue solo, LED 3,5 V con sistema antirrobo
10565-301	Cabezal de otoscopio ri-scope® L2, LED 3,5 V con sistema antirrobo
10567-301	Cabezal de otoscopio ri-scope® L3, LED 3,5 V con sistema antirrobo
10595-301	Cabezal de oftalmoscopio ri-scope® L2, LED 3,5 V con sistema antirrobo
10596-301	Cabezal de oftalmoscopio ri-scope® L3, LED 3,5 V con sistema antirrobo

Módulos de extensión y accesorios

300	Módulo de extensión, 1 mango	10659	Mango con rheotronic® y cable espiral para ri-former®
3654	ri-spec Dispensador de espéculos	3655-100	big ben® cuadrado, sin accesorios
3655-109	big ben® cuadrado, brazaletes con velcro (adulto)	3655-123	big ben® cuadrado, brazaletes con velcro (adulto grande)
3655-130	big ben® cuadrado, brazaletes con velcro (niño)	1840	Termómetro sin contacto ri-thermo® sensioPRO
1835	Termómetro timpánico ri-thermo® tymPRO	12640	Cubierta de sonda para ri-thermo® tymPRO , 30 estuches / 300 piezas
3658***	RPT-100 azul (oral / axilar) con cubierta de sonda, 20 piezas.	3658-01***	RPT-100 rojo (rectal) con cubierta de sonda, 20 piezas
12688	Cubiertas de sonda para termómetro predictivo RPT-100 , paquete de 500 piezas (25 x 20 piezas)		

Cabezas de instrumentos adicionales están disponibles. Todas las cabezas de instrumentos **ri-scope® L de 3,5 V son compatibles con el **ri-former®**.

***Para uso exclusivo con la estación de diagnóstico mural **ri-former®**. No está diseñado para utilizarse como dispositivo independiente.

Visite **riester.de** para más información